



EC REP

Stoddard ApS, Moellegade 32  
8000 Aarhus C, Denmark



## Brugsvejledning

### Klassifikation: Klasse 1 medicinsk udstyr - engangsudstyr

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple  
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Brugsvejledningen er til kun medicinsk udstyr til engangsbrug og dækker de produkter, der er anført i de relevante produktgruppers oversigter.

Maxflex Strips anvendes af tandlægen til efterbehandling og polering af kompositmateriale restaureringer. Strippene fremstilles i to forskellige strips, der består af fire forskellige kornstørrelser, og giver det bedste resultat når de anvendes ved let tryk.

#### STERILISERING

- Strippene kræver ikke sterilisering. Strippene skal opbevares i den originale emballage ved stuetemperatur og beskyttes mod støv og fugtighed indtil ibrugtagning.

#### OPBEVARING

Strippene skal opbevares i hygiejniske standere, skåle eller andre passende beholdere og de skal beskyttes mod støv, fugtighed og kontaminering under opbevaringen. Hvis strippene ikke skal bruges med det samme, tilrådes det at opbevare dem i den originale emballage.

#### KORREKT BRUG:

- Produkter som er deformerede må ikke anvendes og skal bortskaffes.
- Brug skiverne i den rigtige rækkefølge, idet forkerte procedurer kan resultere i en forringet poleringskvalitet.
- Brug ansigtsbeskyttelse for at undgå biologisk overførsel.
- Forkert brug giver ringe resultater og øger risikoen. Disse produkter må kun bruges af kvalificerede medarbejdere.

#### TRYK

- Overdrevent tryk skal til enhver tid undgås.
- Overdreven tryk kan medføre varmeudvikling som kan resultere i beskadigelse af strippen.

Overdreven tryk kan medføre overhedning der beskadiger pulpaen. I særlige tilfælde kan instrumentet endog knække.

## BRUGSANVISNING









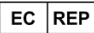






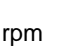



- 1) Isæt den centrale del (det glatte område) på pudsestrips mellem kontaktpunkterne.
- 2) Placer den valgte del af strippen over kompositmaterialeoverfladen der skal poleres.
- 3) Grib fast i begge ender af strippen og træk den grove side over kompositmaterialet med en kraftig frem- og tilbagegående bevægelse.
- 4) Gentag proceduren ved hjælp af en anden kornstørrelse på strippen.
- 5) Bortskaf strippen.
- 6) Gentag trin 1-5 med Stoddard poleringsstrips.

## BORTSKAF SLIDTE INSTRUMENTER

- Beskadigede og ukorrekt formede strips kan forårsage skade.

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Disse dentalinstrumenter er udviklet og fremstillet til deres brug ifm. specifik tandkirurgi. Forkert brug kan skade væv, forårsage for tidlig slitage, ødelægge instrumentet og bringe operatøren, patienten eller tredjemand i fare.

	Manufacturer		Importer		Medical Device		NB Number
	Date of manufacture		Instructions for Use		Autoclave		Contains biological material of animal origin
	Authorised Representative		Lot number		Quantity		Use by date
	Distributor		Product Reference		Eye Protection		Maximum rpm
	Single use only - do not re-use		Keep away from sunlight				
	(01) 05051717145268 (10) 123456 (17) 260920	UDI	(01) GTIN / UDI-DI (10) PI (LOT No.) (17) PI (Expiry Date)				