



## Käyttöohjeet

### Luokitus: Luokka 1 Lääkinnällinen laite – Kertakäyttöiset laitteet

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple  
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Käyttöohjeet koskevat vain kertakäyttöisiä lääkinällisiä laitteita ja niitä tuotteita, jotka on lueteltu vastaavissa tuoteryhmissä.

Hammaskirurgit käyttävät Maxflex-nauhoja komposiittirestauraatioiden viimeistelyyn ja kiillotukseen. Nauhoja kahta lajia, koostuen neljästä eri karkeisuudesta, ja ne ovat parhaimmillaan, kun niitä käytetään pienellä paineella.

#### STERILOINTI

- Nauhat eivät edellytä steriloitua. Nauhat on pidettävä alkuperäisessä pakkauksessaan huoneenlämmössä ja suojattuna pölyltä ja kosteudelta, kunnes niitä käytetään.

#### SÄILYTYS

Nauhat on pidettävä hygieenisissä telineissä tai tarkoitukseen soveltuviissa astioissa, ja ne on suojattava pölyltä, kosteudelta ja kontaminaatiolta säilytyksen aikana. Jos nauhoja ei käytetä heti, on suositeltavaa pitää ne alkuperäisissä pakkauksissaan.

#### ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ:

- Käytä nauhoja oikeassa järjestyksessä, virheellinen toimintatapa voi johtaa kiillotuksen laadun heikkenemiseen.
- Käytä kasvomaksia biologisen siirtymisen estämiseksi.
- Virheellinen käyttö aiheuttaa huonoja tuloksia ja lisää riskiä. Näitä tuotteita saa käyttää vain pätevä henkilöstö.

#### PAINE

- Liiallista painetta on aina vältettävä.
- Liiallinen paine voi aiheuttaa lämmön kertymistä, mikä voi vahingoittaa nauhaa.

Liiallinen paine voi aiheuttaa ylikuumentumisen, mikä vahingoittaa hammasydintä. Äärimmäisissä tapauksissa instrumentti voi jopa murtua.

## OHJEET

- 1) Työnnä viimeistelynauhan keskiosa (alue ilman hankaavaa ainetta) kosketuspisteiden väliin.
- 2) Aseta nauhan valittu osa viimeisteltävän komposiittipinnan päälle.
- 3) Tartu lujasti molempiin päihin ja vedä hioma-aine komposiitin päälle voimakkaalla edestakaisella liikkeellä
- 4) Toista toimenpide käyttämällä toista nauhalajia.
- 5) Hävitä nauha.
- 6) Toista vaiheet 1-5 Stoddard-kiillotusliuskoilla.

## KÄYTETTYJEN VÄLINEIDEN HÄVITTÄMINEN

- Murtuneet ja epämuodostuneet nauhat voivat aiheuttaa vammoja

## VAROTOIMENPITEET

Nämä hammashoidon täinstrumentit on kehitetty ja valmistettu niiden erityistä hammaskirurgista toimenpidettä varten. Vääränlainen käyttö voi vahingoittaa kudosta, aiheuttaa ennenaikaista kulumista, tuhota instrumentin ja vaarantaa käyttäjän, potilaan tai kolmannen osapuolen.



Manufacturer



Importer



Medical Device



NB Number



Date of manufacture




Instructions for Use



Autoclave



Use by date

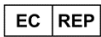

Authorised Representative



Lot number



Quantity



Single use only - do not re-use



Distributor



Product Reference



Eye Protection



Keep away from sunlight



(01) 05051717145268

(10) 123456

(17) 260920

UDI

(01) GTIN / UDI-DI

(10) PI (LOT No.)

(17) PI (Expiry Date)