



EC REP

Stoddard ApS, Moellegade 32
8000 Aarhus C, Denmark



Instructions d'utilisation

Classification : Dispositif médical de classe 1 - Dispositifs à usage unique

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Les instructions d'utilisation concernent les dispositifs médicaux à usage unique et ne couvrent que les produits énumérés dans les annexes des groupes de produits correspondants.

Les bandes Maxflex sont utilisées par le chirurgien-dentiste pour la finition et le polissage des restaurations en composite. Les bandes sont produites en 2 bandes différentes comprenant 4 grains différents et donnent les meilleures performances lorsqu'elles sont appliquées sous une légère pression.

STÉRILISATION

- Les bandes ne nécessitent pas de stérilisation. Les bandes doivent être conservées dans leur emballage d'origine à température ambiante et protégées de la poussière et de l'humidité jusqu'à leur utilisation.

STOCKAGE

Les bandes doivent être conservées dans des supports hygiéniques, des plats ou d'autres récipients appropriés et elles doivent être protégées de la poussière, de l'humidité et de la contamination pendant le stockage. Si les bandes ne sont pas utilisées immédiatement, il est conseillé de les conserver dans leur emballage d'origine.

UTILISATION APPROPRIÉE

- Les produits qui sont déformés ne doivent pas être utilisés et doivent être éliminés.
- Utilisez les bandes dans le bon ordre, des procédures incorrectes peuvent entraîner une réduction de la qualité du polissage.
- Portez un masque facial pour éviter tout transfert biologique.
- Une utilisation incorrecte produit de mauvais résultats et augmente le risque. Ces produits ne doivent être utilisés que par du personnel qualifié.

PRESSION

- Une pression excessive doit être évitée à tout moment.
- Une pression excessive peut provoquer une accumulation de chaleur qui peut endommager la bande.

Une pression excessive peut provoquer une surchauffe, ce qui endommage la pulpe. Dans les cas extrêmes, l'instrument peut même se fracturer.

INSTRUCTIONS









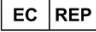








- 1) Insérez la section centrale (la zone sans abrasif) de la bande de finition entre les points de contact.
- 2) Positionnez la partie sélectionnée de la bande sur la surface du composite à finir.
- 3) Saisissez fermement les deux extrémités de la bande et tirez l'abrasif sur le composite dans un mouvement vigoureux de va-et-vient.
- 4) Répétez la procédure en utilisant une autre qualité de la bande.
- 5) Jetez la bande.
- 6) Répétez les étapes 1 à 5 avec les bandes de polissage Stoddard.

MISE AU REBUT D'INSTRUMENTS USÉS

- Les bandes fracturées et de forme incorrecte peuvent causer des blessures.

MESURES DE SÉCURITÉ

Ces instruments dentaires ont été développés et fabriqués pour leur application spécifique en chirurgie dentaire. Une utilisation incorrecte peut endommager les tissus, provoquer une usure prématurée, détruire l'instrument et mettre en danger l'opérateur, le patient ou des tiers.

	Manufacturer		Importer		Medical Device		NB Number
	Date of manufacture		Instructions for Use		Autoclave		Use by date
	Authorised Representative		Lot number		Quantity		Single use only - do not re-use
	Distributor		Product Reference		Eye Protection		Keep away from sunlight
	(01) 05051717145268 (10) 123456 (17) 260920	UDI	(01) GTIN / UDI-DI (10) PI (LOT No.) (17) PI (Expiry Date)				