



Nutzungshinweise

Klassifizierung: Medizinprodukt der Klasse 1 – Einwegvorrichtungen

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Die Nutzungshinweise gelten nur für Medizinprodukte zum einmaligen Gebrauch und umfassen die in den jeweiligen Produktgruppenplänen aufgeführten Produkte.

Maxflex Strips werden vom Zahnarzt für das Finieren und Polieren von Kompositrestaurationen verwendet. Die Strips werden in 2 verschiedenen Strips hergestellt, die aus 4 verschiedenen Körnungen bestehen und die beste Leistung erbringen, wenn sie unter leichtem Druck angewendet werden.

STERILISATION

- Die Strips müssen nicht sterilisiert werden. Die Strips sollten bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung bei Raumtemperatur aufbewahrt und vor Staub und Feuchtigkeit geschützt werden.

LAGERUNG

Die Strips sollten in hygienischen Ständern, Schalen oder anderen geeigneten Behältern aufbewahrt werden und müssen während der Lagerung vor Staub, Feuchtigkeit und Verunreinigungen geschützt werden. Wenn die Strips nicht sofort verwendet werden, sollten sie in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden.

ORDNUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Deformierte Produkte dürfen nicht verwendet und müssen entsorgt werden.
- Verwenden Sie die Strips in der richtigen Reihenfolge. Falsche Verfahren können zu einer weniger guten Polierqualität führen.
- Tragen Sie eine Gesichtsmaske, um eine biologische Übertragung zu verhindern.
- Falsche Verwendung führt zu falschen Ergebnissen und erhöht das Risiko. Diese Produkte dürfen nur von qualifiziertem Personal eingesetzt werden.

DRUCK

- Übermäßiger Druck muss jederzeit vermieden werden.
- Übermäßiger Druck kann zu einem Hitzestau führen, der den Strip beschädigen kann.

Übermäßiger Druck kann zu einer Überhitzung führen, die die Pulpa verletzt. In extremen Fällen kann das Instrument sogar brechen.

ANLEITUNG







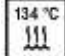

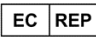








- 1) Führen Sie den mittleren Teil (den Bereich ohne Poliermittel) des Finierstrips zwischen die Kontaktpunkte ein.
- 2) Positionieren Sie den ausgewählten Abschnitt des Strips über der zu finierenden Kompositoberfläche.
- 3) Fassen Sie beide Enden des Strips fest an und ziehen Sie das Poliermittel in einer kräftigen Hin- und Herbewegung über das Kompositmaterial
- 4) Wiederholen Sie das Verfahren mit einer anderen Stripsorte.
- 5) Entsorgen Sie den Strip.
- 6) Wiederholen Sie die Schritte 1-5 mit den Polierstrips von Stoddard.

ENTSORGEN SIE ABGENUTZTE INSTRUMENTE

- Gebrochene und falsch geformte Strips können Verletzungen verursachen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Diese Dentalinstrumente wurden für ihre spezifische zahnärztlich-chirurgische Anwendung entwickelt und hergestellt. Falsche Anwendung kann das Gewebe verletzen, vorzeitigen Verschleiß erzeugen, das Instrument zerstören und den Bediener, den Patienten oder Dritte gefährden.

	Manufacturer		Importer		Medical Device		NB Number
	Date of manufacture		Instructions for Use		Autoclave		Use by date
	Authorised Representative		Lot number		Quantity		Single use only - do not re-use
	Distributor		Product Reference		Eye Protection		Keep away from sunlight
	(01) 05051717145268 (10) 123456 (17) 260920	UDI	(01) GTIN / UDI-DI (10) PI (LOT No.) (17) PI (Expiry Date)				