



EC REP

Stoddard ApS, Moellegade 32  
8000 Aarhus C, Denmark



## Instrucciones para el uso

### Clasificación: Dispositivo médico clase 1 – Dispositivos de único uso

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple  
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Las instrucciones para el uso corresponden a los dispositivos médicos de única vez y sólo cubren aquellos productos que se enumeran en los esquemas de los grupos de productos relevantes.

El odontólogo emplea las tiras Maxflex para el pulido y acabado de las restauraciones con composite. Las tiras se producen en dos tipos distintos compuestos de cuatro granos diferentes, y ofrecen la mejor de las prestaciones cuando se utilizan aplicando una ligera presión.

#### ESTERILIZACIÓN

- Las tiras no requieren esterilización. Las tiras se deben mantener en su envase original a temperatura ambiente y protegerse contra el polvo y la humedad hasta emplearse por primera vez.

#### ALMACENAMIENTO

Las tiras se deben guardar en estantes, platos u otros recipientes aptos e higiénicos, que deberán protegerse contra el polvo, la humedad y la contaminación durante el almacenamiento. Si no se piensa emplear las tiras de inmediato, se aconseja mantenerlas en su envase original.

#### USO CORRECTO

- Los productos que estén deformados no deben utilizarse y deberán desecharse.
- Utilice las tiras en el orden correcto; el uso incorrecto reducirá la calidad del pulido.
- Utilice una mascarilla para evitar la transferencia biológica.
- El uso incorrecto produce malos resultados y aumenta los riesgos. Solamente el personal habilitado debe utilizar estos productos.

#### PRESIÓN

- La presión excesiva se debe evitar en todo momento.
- Una presión excesiva puede provocar la acumulación de calor, lo cual podría dañar la tira.

Una presión excesiva puede provocar sobrecalentamiento y lesionar la pulpa. En casos extremos, el instrumento puede llegar a fracturarse.

## INSTRUCCIONES

- 1) Introduzca la parte central (zona sin abrasivo) de la tira de acabado entre los puntos de contacto.
- 2) Ponga la parte seleccionada de la tira encima de la superficie del composite que requiera acabado.
- 3) Tome con firmeza ambos extremos de la tira y arrastre el abrasivo por encima del composite con un movimiento fuerte, adelante y atrás.
- 4) Repita el procedimiento utilizando otro grado de la tira.
- 5) Deseche la tira.
- 6) Repita los pasos del 1 al 5 con las tiras de pulido Stoddard.

## DESECHAR LOS INSTRUMENTOS DESGASTADOS

- Las tiras fracturadas o de formas incorrectas pueden causar lesiones.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Estos instrumentos dentales fueron desarrollados y fabricados para su aplicación en una cirugía dental específica. El uso incorrecto puede dañar tejidos, provocar un desgaste prematuro, destruir el instrumento y poner en peligro al operador, el paciente o a terceros.



Manufacturer



Importer



Medical Device



NB Number



Date of manufacture




Instructions for Use



Autoclave



Use by date

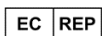

Authorised Representative



Lot number



Quantity



Single use only - do not re-use



Distributor



Product Reference



Eye Protection



Keep away from sunlight



(01) 05051717145268

(10) 123456

(17) 260920

UDI

(01) GTIN / UDI-DI

(10) PI (LOT No.)

(17) PI (Expiry Date)