



EC REP



## Brugsvejledning

### Klassifikation: Klasse 1 medicinsk udstyr - engangsudstyr

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple

MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Grit Size	FEPA Ref	Size (Micron)	Colour
Coarse/Medium	F180	63	Blue
	F320	29.2	Purple
Fine/Ultra-fine	F400	17.3	Pink
	F800	6.5	White

Brugsvejledningen er til kun medicinsk udstyr til engangsbrug og dækker de produkter, der er anført i de relevante produktgruppers oversigter.

#### TILSIGTET ANVENDELSE OG INDIKATIONER

Maxflex Strips anvendes af tandlægen til efterbehandling og polering af kompositmateriale restaureringer.

Strippene fremstilles i to forskellige strips, der består af fire forskellige kornstørrelser, og giver det bedste resultat når de anvendes ved let tryk.

#### STERILISERING

- Strippene kræver ikke sterilisering. Strippene skal opbevares i den originale emballage ved stuetemperatur og beskyttes mod støv og fugtighed indtil ibrugtagning.

#### OPBEVARING

Strippene skal opbevares i hygiejniske standere, skåle eller andre passende beholdere og de skal beskyttes mod støv, fugtighed og kontaminering under opbevaringen. Hvis strippene ikke skal bruges med det samme, tilrådes det at opbevare dem i den originale emballage.

#### KORREKT BRUG:

- Produkter som er deformerede må ikke anvendes og skal bortskaffes.
- Brug skiverne i den rigtige rækkefølge, idet forkerte procedurer kan resultere i en forringet poleringskvalitet.
- Brug ansigtsbeskyttelse for at undgå biologisk overførsel.
- Forkert brug giver ringe resultater og øger risikoen. Disse produkter må kun bruges af kvalificerede medarbejdere.
- Hold tør
- Holdes væk fra sollys

## TRYK

- Overdrevent tryk skal til enhver tid undgås.
- Overdreven tryk kan medføre varmeudvikling som kan resultere i beskadigelse af strippen.

Overdreven tryk kan medføre overhedning der beskadiger pulpaen. I særlige tilfælde kan instrumentet endog knække.

## BRUGSANVISNING

- 1) Isæt den centrale del (det glatte område) på pudsestrips mellem kontaktpunkterne.
- 2) Placer den valgte del af strippen over kompositmaterialeoverfladen der skal poleres.
- 3) Grib fast i begge ender af strippen og træk den grove side over kompositmaterialet med en kraftig frem- og tilbagegående bevægelse.
- 4) Gentag proceduren ved hjælp af en anden kornstørrelse på strippen.
- 5) Bortskaf strippen.
- 6) Gentag trin 1-5 med Stoddard poleringsstrips.

## BORTSKAF SLIDTE INSTRUMENTER

- Beskadigede og ukorrekt formede strips kan forårsage skade.

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Disse dentalinstrumenter er udviklet og fremstillet til deres brug ifm. specifik tandkirurgi. Forkert brug kan skade væv, forårsage for tidlig slitage, ødelægge instrumentet og bringe operatøren, patienten eller tredjemand i fare.

## ADVARSLER

Brugte roterende instrumenter bør betragtes som forurenede, og der bør derfor træffes passende håndteringsforholdsregler under behandlingen. Der skal bæres handsker, øjenbeskyttelse og maske. Der kan kræves andre forholdsregler, hvis der er specifikke infektions- eller krydskontamineringsrisici fra patienten.

## KONTRAINDIKATIONER

Ingen kendte kontraindikationer.



Fabrikant



Importør



Distributør



NB-nummer



Fremstillingsdato




Instruktioner til brug



Kvantitet



Brug efter dato

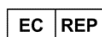

Autoriseret  
Repræsentant



Lotnummer



Øjenbeskyttelse



Hold tør



Medicinsk Udstyr



Produktreference



Holdes væk fra  
sollys



Kun til  
engangsbrug –  
må ikke  
genbruges



(01) 05051717145268  
(10) 123456  
(17) 260920

UDI

(01) GTIN / UDI-DI  
(10) PI (LOT No.)  
(17) PI (Expiry Date)



Unik enhedsidentifikator