



EC REP

Stoddard ApS, Moellegade 32
8000 Aarhus C, Denmark



Käyttöohjeet

Luokitus: Luokka 1 Lääkinnällinen laite – Kertakäyttöiset laitteet

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Grit Size	FEPA Ref	Size (Micron)	Colour
Coarse/Medium	F180	63	Blue
	F320	29.2	Purple
Fine/Ultra-fine	F400	17.3	Pink
	F800	6.5	White

Käyttöohjeet koskevat vain kertakäyttöisiä lääkinällisiä laitteita ja niitä tuotteita, jotka on lueteltu vastaavissa tuoteryhmissä.

KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄYTTÖAIHEET

Hammaskirurgit käyttävät Maxflex-nauhoja komposiittirestauraatioiden viimeistelyyn ja kiillotukseen. Nauhoja kahta lajia, koostuen neljästä eri karkeisuudesta, ja ne ovat parhaimmillaan, kun niitä käytetään pienellä paineella.

STERILOINTI

- Nauhat eivät edellytä sterilointia. Nauhat on pidettävä alkuperäisessä pakkauksessaan huoneenlämmössä ja suojattuna pölyltä ja kosteudelta, kunnes niitä käytetään.

SÄILYTYS

Nauhat on pidettävä hygieenisissä telineissä tai tarkoitukseen soveltuviissa astioissa, ja ne on suojattava pölyltä, kosteudelta ja kontaminaatiolta säilytyksen aikana. Jos nauhoja ei käytetä heti, on suositeltavaa pitää ne alkuperäisissä pakkauksissaan.

ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ:

- Käytä nauhoja oikeassa järjestyksessä, virheellinen toimintatapa voi johtaa kiillotuksen laadun heikkenemiseen.
- Käytä kasvomaksia biologisen siirtymisen estämiseksi.
- Virheellinen käyttö aiheuttaa huonoja tuloksia ja lisää riskiä. Näitä tuotteita saa käyttää vain pätevä henkilöstö.
- Pidä kuivana
- Pidä poissa auringonvalolta

PAINE

- Liiallista painetta on aina vältettävä.
- Liiallinen paine voi aiheuttaa lämmön kertymistä, mikä voi vahingoittaa nauhaa.

Liiallinen paine voi aiheuttaa ylikuumentumisen, mikä vahingoittaa hammasydintä. Äärimmäisissä tapauksissa instrumentti voi jopa murtua.

OHJEET

- 1) Työnnä viimeistelynauhan keskiosa (alue ilman hankaavaa ainetta) kosketuspisteiden väliin.
- 2) Aseta nauhan valittu osa viimeisteltävän komposiittipinnan päälle.
- 3) Tartu lujasti molempiin päihin ja vedä hioma-aine komposiitin päälle voimakkaalla edestakaisella liikkeellä
- 4) Toista toimenpide käyttämällä toista nauhalajia.
- 5) Hävitä nauha.
- 6) Toista vaiheet 1-5 Stoddard-kiillotusliuskoilla.

KÄYTETTYJEN VÄLINEIDEN HÄVITTÄMINEN

- Murtuneet ja epämuodostuneet nauhat voivat aiheuttaa vammoja

VAROTOIMENPITEET

Nämä hammashoidon täinstrumentit on kehitetty ja valmistettu niiden erityistä hammaskirurgista toimenpidettä varten. Vääränlainen käyttö voi vahingoittaa kudosta, aiheuttaa ennenaikaista kulumista, tuhota instrumentin ja vaarantaa käyttäjän, potilaan tai kolmannen osapuolen.

VAROITUKSET

Käytettyjä pyöriviä instrumentteja pidetään epäpuhtaina, joten käsittelyn aikana on noudatettava asianmukaisia varotoimenpiteitä. Käsineitä, silmäsuojaimia ja maskia on käytettävä. Muita toimenpiteitä voidaan tarvita, jos potilaalla on erityisiä infektiio- tai ristikontaminaatio- riskejä.

VASTA

Ei tunnettuja vasta-aiheita.



Valmistaja



Maahantuoja



Jakelija



Huom.-numero



Valmistuspäivämäärä




Käyttöohjeet



Määrä



Käytä päivämäärään mennessä

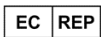

Valtuutettu edustaja



Eränumero



Silmäsuoja



Pidä kuivana



Lääketieteellinen Laite



Tuoteviite



Pidä poissa auringonvalolta



Vain kertakäyttöinen - älä käytä uudelleen



(01) 05051717145268
(10) 123456
(17) 260920

UDI

(01) GTIN / UDI-DI
(10) PI (LOT No.)
(17) PI (Expiry Date)



Yksilöllinen laitetunniste