



EC REP



## Instructions d'utilisation Classification : Dispositif médical de classe 1 - Dispositifs à usage unique

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple  
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Grit Size	FEPA Ref	Size (Micron)	Colour
Coarse/Medium	F180	63	Blue
	F320	29.2	Purple
Fine/Ultra-fine	F400	17.3	Pink
	F800	6.5	White

Les instructions d'utilisation concernent les dispositifs médicaux à usage unique et ne couvrent que les produits énumérés dans les annexes des groupes de produits correspondants.

### UTILISATION PRÉVUE ET INDICATIONS

Les bandes Maxflex sont utilisées par le chirurgien-dentiste pour la finition et le polissage des restaurations en composite. Les bandes sont produites en 2 bandes différentes comprenant 4 grains différents et donnent les meilleures performances lorsqu'elles sont appliquées sous une légère pression.

### STÉRILISATION

- Les bandes ne nécessitent pas de stérilisation. Les bandes doivent être conservées dans leur emballage d'origine à température ambiante et protégées de la poussière et de l'humidité jusqu'à leur utilisation.

### STOCKAGE

Les bandes doivent être conservées dans des supports hygiéniques, des plats ou d'autres récipients appropriés et elles doivent être protégées de la poussière, de l'humidité et de la contamination pendant le stockage. Si les bandes ne sont pas utilisées immédiatement, il est conseillé de les conserver dans leur emballage d'origine.

### UTILISATION APPROPRIÉE

- Les produits qui sont déformés ne doivent pas être utilisés et doivent être éliminés.
- Utilisez les bandes dans le bon ordre, des procédures incorrectes peuvent entraîner une réduction de la qualité du polissage.
- Portez un masque facial pour éviter tout transfert biologique.
- Une utilisation incorrecte produit de mauvais résultats et augmente le risque. Ces produits ne doivent être utilisés que par du personnel qualifié.
- Gardez sec
- Tenir à l'abri de la lumière du soleil

### PRESSION

- Une pression excessive doit être évitée à tout moment.
- Une pression excessive peut provoquer une accumulation de chaleur qui peut endommager la bande.

Une pression excessive peut provoquer une surchauffe, ce qui endommage la pulpe. Dans les cas extrêmes, l'instrument peut même se fracturer.

## INSTRUCTIONS

- 1) Insérez la section centrale (la zone sans abrasif) de la bande de finition entre les points de contact.
- 2) Positionnez la partie sélectionnée de la bande sur la surface du composite à finir.
- 3) Saisissez fermement les deux extrémités de la bande et tirez l'abrasif sur le composite dans un mouvement vigoureux de va-et-vient.
- 4) Répétez la procédure en utilisant une autre qualité de la bande.
- 5) Jetez la bande.
- 6) Répétez les étapes 1 à 5 avec les bandes de polissage Stoddard.

## MISE AU REBUT D'INSTRUMENTS USÉS

- Les bandes fracturées et de forme incorrecte peuvent causer des blessures.

## MESURES DE SÉCURITÉ

Ces instruments dentaires ont été développés et fabriqués pour leur application spécifique en chirurgie dentaire. Une utilisation incorrecte peut endommager les tissus, provoquer une usure prématurée, détruire l'instrument et mettre en danger l'opérateur, le patient ou des tiers.

## AVERTISSEMENTS

Les instruments rotatifs usagés doivent être considérés comme contaminés et les précautions de manipulation appropriées doivent être prises. Il faut porter des gants, des lunettes de protection et un masque. D'autres mesures peuvent être nécessaires si le patient présente des risques spécifiques d'infection ou de contamination croisée.

## CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication connue.



Fabricant



Importeur



Distributeur



NB Numéro



Date de fabrication




Mode d'emploi



Quantité



Utiliser par date

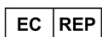

Représentant Autorisé



Numéro de lot



Protection des yeux



Gardez sec



Dispositif médical



Référence du produit



Tenir à l'abri de la lumière du soleil



Usage unique seulement – ne pas réutiliser



(01) 05051717145268  
(10) 123456  
(17) 260920

UDI

(01) GTIN / UDI-DI  
(10) PI (LOT No.)  
(17) PI (Expiry Date)



Identificateur unique de l'appareil