



EC REP

Stoddard ApS, Moellegade 32
8000 Aarhus C, Denmark



Οδηγίες χρήσης

Κατηγοριοποίηση: Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1 – Συσκευές μίας χρήσης

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Grit Size	FEPA Ref	Size (Micron)	Colour
Coarse/Medium	F180	63	Blue
	F320	29.2	Purple
Fine/Ultra-fine	F400	17.3	Pink
	F800	6.5	White

Το έγγραφο 'ι οδηγίες χρήσης' προορίζεται για ιατρικές συσκευές μίας χρήσης και καλύπτει μόνο τα προϊόντα που παρατίθενται στους σχετικούς καταλόγους των ομάδων προϊόντων.

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι ταινίες Maxflex Strips χρησιμοποιούνται από τον χειρουργό οδοντίατρο για την τελική επεξεργασία και τη στίλβωση αποκαταστάσεων σύνθετων υλικών.

Οι ταινίες κατασκευάζονται σε 2 διαφορετικές ταινίες που αποτελούνται από 4 διαφορετικά μεγέθη κόκκων και παρέχουν βέλτιστη απόδοση όταν εφαρμόζονται υπό ελαφριά πίεση.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

- Οι ταινίες δεν απαιτούν αποστείρωση. Οι ταινίες θα πρέπει να φυλάσσονται στην αρχική τους συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου και να προστατεύονται από τη σκόνη και την υγρασία μέχρι την πρώτη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οι ταινίες θα πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρές βάσεις, δίσκους ή άλλους κατάλληλους περιέκτες και θα πρέπει να προστατεύονται από τη σκόνη, την υγρασία και τη μόλυνση κατά την αποθήκευση. Εάν οι ταινίες δεν χρησιμοποιηθούν αμέσως, συνιστάται να τις φυλάσσετε στην αρχική τους συσκευασία.

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Τα προϊόντα που έχουν παραμορφωθεί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και πρέπει να απορρίπτονται.
- Χρησιμοποιείτε τις ταινίες με τη σωστή σειρά. Οι εσφαλμένες διαδικασίες μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της ποιότητας στίλβωσης.
- Φοράτε μάσκα προσώπου για να αποτρέψετε τη βιολογική μεταφορά.
- Η εσφαλμένη χρήση προκαλεί ανεπαρκή αποτελέσματα και αυξάνει τον κίνδυνο. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Κρατήστε στεγνά
- Κρατήστε μακριά από το φως του ήλιου

ΠΙΕΣΗ

Αποφεύγετε την άσκηση υπερβολικής δύναμης!

- Η υπερβολική πίεση πρέπει να αποφεύγεται ανά πάσα στιγμή.
- Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ταινία.

Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, η οποία προκαλεί βλάβη στον πολφό. Σε ακραίες περιπτώσεις, το εργαλείο μπορεί και να ρηγματωθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ

- 1) Εισαγάγετε το κεντρικό τμήμα (την περιοχή χωρίς σπλιβωτικό) της ταινίας τελικής επεξεργασίας ανάμεσα στα σημεία επαφής.
- 2) Τοποθετήστε το επιλεγμένο τμήμα της ταινίας πάνω από την επιφάνεια του σύνθετου υλικού που πρόκειται να υποβληθεί σε τελική επεξεργασία.
- 3) Κρατήστε σταθερά και τα δύο άκρα της ταινίας και τραβήξτε το σπλιβωτικό πάνω από το σύνθετο υλικό με μια έντονη, παλινδρομική κίνηση
- 4) Επαναλάβετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας μια ταινία διαφορετικής βαθμίδας.
- 5) Απορρίψτε την ταινία.
- 6) Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 με τις ταινίες στίλβωσης Stoddard.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Οι ρηγματωμένες και λανθασμένα διαμορφωμένες ταινίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτά τα οδοντιατρικά εργαλεία σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για τη συγκεκριμένη οδοντιατρική χειρουργική εφαρμογή τους. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να βλάψει τον ιστό, να προκαλέσει πρόωρη φθορά, να καταστρέψει το εργαλείο και να θέσει σε κίνδυνο τον χειριστή, τον ασθενή ή τρίτους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα χρησιμοποιημένα περιστροφικά εργαλεία θα πρέπει να θεωρούνται μολυσμένα και θα πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις κατά τον χειρισμό. Πρέπει να φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκα. Ενδέχεται να απαιτούνται άλλα μέτρα εάν υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι μόλυνσης ή διασταυρούμενης μόλυνσης από τον ασθενή.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.



Βιομήχανος



Εισαγωγέας



Διανομέας



Αριθμός σημείωσης



Ημερομηνία
Κατασκευής




Οδηγίες χρήσης



Ποσότητα



Χρήση με βάση
Ημερομηνία

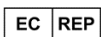

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος



Αριθμός παρτίδας



Προστασία ματιών



Κρατήστε στεγνά



Ιατρική συσκευή



Αναφορά προϊόντος



Κρατήστε μακριά
από το φως του
ήλιου



Μόνο μεμονωμένη
χρήση - Μην
επαναχρησιμοποιείτε



(01)05051717145268
(10) 123456
(17) 260920

UDI

(01) GTIN / UDI-DI
(10) PI (LOT No.)
(17) PI (Expiry Date)



Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής