



EC REP



Istruzioni per l'uso

Classificazione: Dispositivo medico di Classe 1 – Dispositivi monouso

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Grit Size	FEPA Ref	Size (Micron)	Colour
Coarse/Medium	F180	63	Blue
	F320	29.2	Purple
Fine/Ultra-fine	F400	17.3	Pink
	F800	6.5	White

Le istruzioni per l'uso e per la si riferiscono a dispositivi medici monouso e riguardano esclusivamente i prodotti elencati nelle schede dei gruppi di prodotti pertinenti.

DESTINAZIONE D'USO E INDICAZIONI

Le strisce Maxflex servono all'odontoiatra per realizzare la finitura e la lucidatura dei restauri in composito. Le strisce sono prodotte in 2 forme diverse con 4 differenti gradi di abrasività, e offrono le migliori prestazioni quando applicate esercitando una leggera pressione.

STERILIZZAZIONE

- Le strisce non necessitano di sterilizzazione. Le strisce devono essere conservate nella confezione originale a temperatura ambiente e protette da polvere e umidità fino all'utilizzo.

STOCCAGGIO

Le strisce devono essere conservate su supporti, vassoi o altri contenitori idonei che presentino condizioni igieniche adeguate. Devono inoltre essere protette da polvere, umidità e contaminazioni durante lo stoccaggio. Se le strisce non vengono utilizzate subito, si consiglia di conservarle nella loro confezione originale.

USO CORRETTO

- I prodotti deformati non devono essere utilizzati e devono essere smaltiti.
- Utilizzare le strisce nell'ordine corretto indicato. Se le procedure non vengono seguite correttamente, la lucidatura potrebbe risultare di qualità inferiore.
- Indossare una maschera facciale per evitare lo scambio di agenti biologici.
- Un uso improprio produce risultati scadenti e aumenta il rischio. Questi prodotti devono essere utilizzati solo da professionisti qualificati.
- Mantenere asciutto
- Tenere lontano dalla luce solare

PRESSIONE

Evitare una forza di pressione eccessiva!

- Una pressione eccessiva deve essere sempre evitata.
- Una pressione eccessiva può causare un accumulo di calore che può causare danni alla striscia.

Una pressione eccessiva può provocare un surriscaldamento che può danneggiare la polpa. In casi estremi, lo strumento potrebbe rompersi.

ISTRUZIONI

- 1) Inserire la parte centrale (l'area senza abrasivo) della striscia di finitura tra i punti di contatto.
- 2) Posizionare la porzione selezionata della striscia sulla superficie del composito da rifinire.
- 3) Afferrare saldamente entrambe le estremità della striscia e trascinare l'abrasivo sul composito con un movimento vigoroso avanti e indietro.
- 4) Ripetere la procedura utilizzando un'altra porzione della striscia.
- 5) Smaltire la striscia.
- 6) Ripetere i passaggi 1-5 con le strisce di lucidatura Stoddard.

SMALTIRE GLI STRUMENTI USURATI

- Strisce fratturate e di forma non corretta possono causare lesioni.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA

Questi strumenti odontoiatrici sono stati sviluppati e prodotti per la loro specifica applicazione chirurgica odontoiatrica. Un uso improprio può danneggiare i tessuti, causare un'usura prematura, distruggere lo strumento e mettere in pericolo l'operatore, il paziente o terzi.

AVVERTENZE

Gli strumenti rotanti usati devono essere considerati contaminati e devono essere prese adeguate precauzioni per la loro manipolazione. Indossare guanti, protezioni per gli occhi e una maschera. Possono essere necessarie altre misure in caso di infezione specifica o rischi di contaminazione incrociata da parte del paziente.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna controindicazione nota.



Fabbricante



Importatore



Distributore



NB Numero



Data di produzione




Istruzioni per l'uso



Quantità



Utilizzo per data

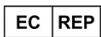

Rappresentante
Autorizzato



Numero di lotto



Protezione per gli
occhi



Mantenere
asciutto



Dispositivo Medico



Riferimento
Prodotto



Tenere lontano
dalla luce solare



Solo un uso
unico: non
riutilizzare



(01)05051717145268
(10) 123456
(17) 260920

UDI

(01) GTIN / UDI-DI
(10) PI (LOT No.)
(17) PI (Expiry Date)



Identificatore univoco del dispositivo