



EC REP



## Bruksanvisning

### Klassifisering: Klasse 1 Medisinsk utstyr – enheter for engangsbruk

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple  
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Grit Size	FEPA Ref	Size (Micron)	Colour
Coarse/Medium	F180	63	Blue
	F320	29.2	Purple
Fine/Ultra-fine	F400	17.3	Pink
	F800	6.5	White

Bruksanvisning er kun for medisinsk utstyr til engangsbruk og dekker produktene som er oppført i de aktuelle produktgruppeplanene.

#### TILTENKT BRUK OG INDIKASJONER

Maxflex-striper brukes av tannkirurgen til etterbehandling og polering av komposittfillinger.

Stripene produseres i to ulike versjoner med fire ulike grovhetsnivåer, og gir best ytelse når det anvendes lett trykk.

#### STERILISERING

- Stripene krever ikke sterilisering. Stripene bør bli oppbevart i originalforpakningen ved romtemperatur og bli beskyttet mot støv og fuktighet helt frem til de blir brukt.

#### STORAGE

Stripene bør oppbevares i hygieniske stativer, skåler eller andre egnede oppbevaringsbeholdere, og de må beskyttes mot støv, fuktighet og kontaminering under oppbevaring. Hvis stripene ikke brukes med en gang, anbefales det at du oppbevarer dem i originalforpakningen.

#### RIKTIG BRUK

- Deformerte produkter skal ikke brukes og må bli kassert.
- Bruk stripene i riktig rekkefølge; uriktig prosedyrefølgning kan resultere i en reduksjon av poleringskvaliteten.
- Bruk en ansiktsmaske for å forhindre biologisk overføring.
- Uriktig bruk gir dårlige resultater og øker risikoer. Disse produktene skal kun brukes av kvalifisert personell.
- Hold tørt
- Hold deg unna sollys

## PRESS

- Overdrevent trykk må alltid unngås.
- Overdrevent trykk kan føre til varmeoppbygging som kan skade stripen.

Overdrevent trykk kan føre til overoppheting som kan skade tannmargen. I ekstreme tilfeller kan til og med instrumentet knekke.

## INSTRUKSJONER

- 1) Sett inn sentralpunktet (området uten slipeevne) på etterbehandlingsstripen mellom kontaktpunktene.
- 2) Plasser den valgte porsjonen av stripen over komposittoverflaten som skal etterbehandles.
- 3) Grip godt tak i begge ender av stripen og dra slipeenden over komposittmaterialet i en kraftig frem-og-tilbake-bevegelse.
- 4) Gjenta prosessen med en stripe av et annet grovhetsnivå.
- 5) Kasser stripen.
- 6) Gjenta trinn 1-5 med Stoddard-poleringsstriper.

## KASSERING AV BRUKTE INSTRUMENTER

- Knekte og uriktig formede striper kan forårsake skade.

## SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Disse tanninstrumentene ble utviklet og produsert for deres spesifikke tannkirurgiske bruk. Feil bruk kan skade vev, forårsake for tidlig slitasje, ødelegge instrumentet og sette operatøren, pasienten eller tredjeparter i fare.

## ADVARSLER

Brukte roterende instrumenter bør betraktes som forurensede, og passende håndteringstiltak bør tas under behandlingen. Hansker, øyebeskyttelse og maske bør brukes. Andre tiltak kan være nødvendig hvis pasienten har spesifikke infeksjons- eller krysskontamineringsrisikoer.

## KONTRAINDIKASJONER

Ingen kjente kontraindikasjoner.



Fabrikant



Importør



Distributør



NB-nummer



Produksjonsdato




Instruksjoner for bruk



Kvantitet



Bruk etter dato

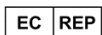

Autorisert Representant



Lot nummer



Øyebeskyttelse



Hold tørt



Medisinsk Enhet



Produktreferanse



Hold deg unna sollys



Kun engangsbruk – ikke gjenbruk



(01) 05051717145268  
(10) 123456  
(17) 260920

UDI

(01) GTIN / UDI-DI  
(10) PI (LOT No.)  
(17) PI (Expiry Date)



Unik enhetsidentifikator